

機械器具(02) 医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器 12276000

ネオライト

【警告】


- 電源ケーブルは医療用3ピンコンセント(アース付)に接続すること。
- 2ピン/3ピン変換プラグは使用しないこと。
- 電源を入れたまま設置やメンテナンスを行わないこと。
- 分解・改造を行わないこと。

【禁忌・禁止】

- 爆発の危険性のある場所では使用しないこと。
 - 光源を直接のぞかないこと。
- [強烈な光により目を傷める恐れがあります。]

【形状・構造及び原理等】

■各部の名称

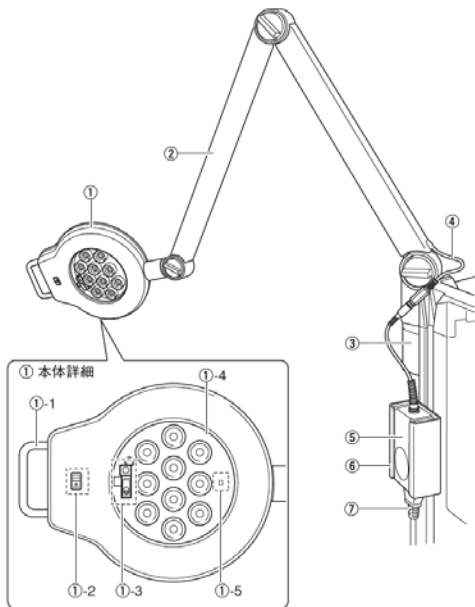

番号	名 称
①	本体
①-1	ハンドグリップ
①-2	メインスイッチ
①-3	非接触センサー
①-4	保護ガラス
①-5	通電表示

番号	名 称
②	アーム
③	アタッチメント
④	電源プラグ
⑤	ACアダプター
⑥	ブラケット
⑦	電源コード

■寸法・重量

寸法 : 240 mm × 170 mm × 30 mm (本体のみ)
重量 : 約 0.9 kg

■電気的定格

定 格 電 圧 AC100V
周 波 数 50/60 Hz
電 源 入 力 18 W
電撃に対する保護の形式 クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度 B 形装着部

■原理

本品は光源として発光ダイオード(LED)を用いた医療用照明器具です。

【使用目的、効能又は効果】

本品は診療時及び治療時に使用する医療用照明器具です。

【品目仕様等】

照度 : 約 35000 lx (光源からの距離が 70 cm のとき)
約 45000 lx (光源からの距離が 50 cm のとき)

【操作方法又は使用方法等】

■使用前の準備

- 1) 本品のアタッチメント及びブラケットを、F レール等に取り付け、固定します。本品の固定が完了してから、電源プラグ類を接続し、電源コード(本届出内容には含まれない)を医療用コンセントに接続してください。

■使用方法

- 1) 本体底面部にあるメインスイッチを入れ、ライトを点灯させます。
- 2) ハンドグリップを握り、ライトの位置、角度を調節します。
- 3) ライト点灯中、光源付近にある非接触センサに手をかざすと待機状態となり、ライトが消灯します。再度ライトを点灯させる場合も、同様に操作してください。

注 : メインスイッチが ON の時は、光源付近に青色 LED が点灯します。この青色 LED は、本品を待機状態とした場合でも消灯しません。

■消毒

消毒液の一例として、下記の水溶液を使用することを推奨します。

- 塩化ベンザルコニウム水溶液(オスバン等)
- 塩化ベンゼトニウム水溶液(ハイアミン等)
- クロルヘキシジン水溶液(ヒビテン等)

使用する消毒液の濃度などは、それぞれの製剤に記載の用法・用量指示に従ってください。

下記の消毒液は部位を限定して使用することを推奨します。

- 塩化アルキルジアミノエチルグリシン(テゴー51 等)
- グルタラル水溶液(ステリハイド等)
- 次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン等) ※金属部は除く
- 消毒用エタノール ※プラスチック部は除く

【使用上の注意】

- 使用前点検を必ず行ってください。特に LED ライトや保護ガラスにひびや割れがある場合は使用しないこと。
- ライトの位置調節は必ずハンドグリップを持って行うこと。
- 非接触センサには日光補正機能が付いています。但し、ライトを窓に向けてたり、直接日光を当てたりするとライトが消える場合があるので注意すること。
- 清拭の際、研磨剤を含んだ消毒液は使用しないこと。

【貯蔵・保管及び使用期間等】

操 作 環 境 温 度 : 0~40℃
保 管・輸 送 時 環 境 温 度 : 0~60℃
相 対 湿 度 : 10~90% (結露なきこと)

取扱説明書を必ずご参照ください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■製造業者

アトムメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-18-15

TEL:03-3815-2311(大代表) FAX:03-3812-3144(代表)